


pipetus®-red dot

Xxxx.

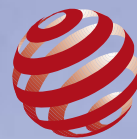

reddot design award
winner 2005

pipetus[®]-red dot. Xxx, xxx.

pipetus[®]-red dot possède tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour le pipetage. Et même un peu plus: son ergonomie bien étudiée et son faible poids autorisent un pipetage en série hautement précis, sans que l'opérateur fatigue; l'accumulateur permet de travailler longtemps et de façon flexible; le clapet anti-retour de sécurité protège l'appareil et votre santé. Sur le plan du respect de l'environnement aussi, du confort d'utilisation et de la rentabilité, pipetus[®]-red dot a tout ce qu'il faut pour convaincre: Accus NiMH exempts de cadmium, tiges de valves en compound céramique et un prix très attrayant.

- ergonomie bien étudiée pour un pipetage rapide, sûr et précis
- appareil à accumulateurs
- les affichages couleur à LED indiquent tous les réglages de l'appareil
- présélection EX / BlowOut pour pipetage de volumes précis avec pipettes à refoulement par gravité ou pipettes à refoulement par soufflage
- vitesse de pipetage qui se pilote par enfoncement d'un bouton
- accus NiMH exempts de cadmium; chargement direct
- moteur de pompe silencieux, exempt de vibrations
- pipetage en continu jusqu'à une semaine
- adaptateur silicone pour étanchéité absolue au raccord de toutes les pipettes
- valves de dosage fin avec tiges en compound céramique
- réglage exact du ménisque par valves sensibles
- clapet anti-retour de sécurité
- filtre hydrophobe à membrane PTFE avec pores de 0,2 µm
- pour pipettes graduées, jaugées et pipettes Pasteur, de 0,1 ml à 200 ml

Caractéristiques	
Mode de fonctionnement	sur accus, chargement direct au moyen du chargeur, protection contre la surcharge, pas d'effet-mémoire
Plage volumétrique	0,1 - 200 ml
Ex / Blow out	réglage par touche, affichage au display par des LED couleur
Débit d'aspiration	régulation par touche, affichage au display par des LED couleur
Poids	240 g
Matériau boîtier	robuste PA6
Possibilité de stérilisation	portoir à pipettes à 121°C (sans filtre à membrane PTFE)
Système de sécurité	clapet anti-retour remplaçable
Références	
990 70 00 40	pipetus [®] -red dot, 230 V, connecteur EUR, portoir à pipettes avec clapet anti-retour de sécurité, filtre et support mural
990 76 00 40	pipetus [®] -red dot, 230 V, connecteur UK, portoir à pipettes avec clapet anti-retour de sécurité, filtre et support mural
990 80 00 40	pipetus [®] -red dot, 120 V, connecteur US, portoir à pipettes avec clapet anti-retour de sécurité, filtre et support mural

Pour en savoir plus sur nos solutions de dosage, de pipetage, de titration, de volumétrie et sur nos capillaires de précision en verre, veuillez consulter notre site www.hirschmann-laborgeraete.de

Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG
Hauptstr. 7 - 15
74246 Eberstadt, Allemagne
Tél. +49 (0) 71 34/5 11-0
Fax +49 (0) 71 34/5 11-90
www.hirschmann-laborgeraete.de
info@hirschmann-laborgeraete.de



ÂCE notre produit remplit tous les critères fixés dans la directive CE et a été vérifié selon les procédures en vigueur